



Touchmed® Foam ist eine moderne hydroaktive Auflage aus gemischtzelligem Polyurethanschaum. Dieser saugfähige Verband ist für exsudierende Wunden unterschiedlicher Art bestimmt. Die besondere Struktur des Schaums fördert eine schnelle vertikale Absorption des Exsudats und erleichtert dessen Verbleib im Inneren des Verbands.

Das randlose Format kann zugeschnitten und bequem an jeden Körperbereich angepasst werden, während es sich bei der Version mit Rand um einen kompletten, hochsaugfähigen Verband handelt, der den Polyurethanschaum mit einer Zwischenschicht aus weichem Hydrokolloid kombiniert.

Die große Vielfalt an Touchmed® Foam-Artikeln ermöglicht es dem Pflegepersonal nicht nur, die optimale Grösse, sondern auch die gewünschte Dicke und die ideale Form zu wählen.


Vorteile

- Verwendung unter einem elastischen Kompressionsverband
- Absorption und Management des Exsudats
- Leichte Anwendung
- Klebt nicht an der Wunde
- Semipermeabler äusserer Barrierefilm
- Heilung in feuchtem Milieu

Indikationen

Touchmed® Foam ist als saugfähiger Verband für chronischen Verletzungen indiziert, insbesondere:

- Ulzera der unteren Extremitäten
- Dekubitusverletzungen
- Diabetische Fußverletzungen
- Verbrennungen I. und II. Grades
- Spenderbereiche
- Onkologische Geschwüre

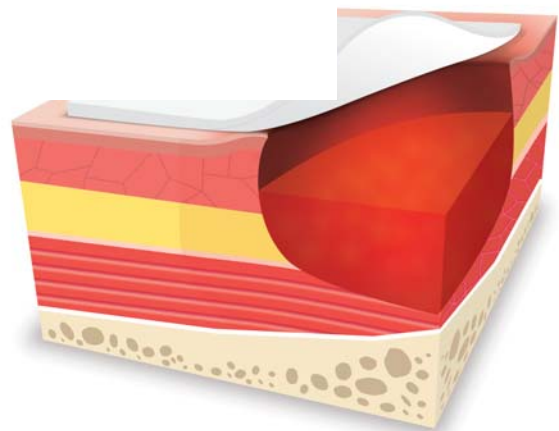

Normal



Wundstadium

1 2 3 4

Saugfähigkeit



Dünn



Wundstadium

1 2 3 4


Saugfähigkeit



Das randlose Format erfordert eine zusätzliche Fixierung



Wundauflage mit Rand

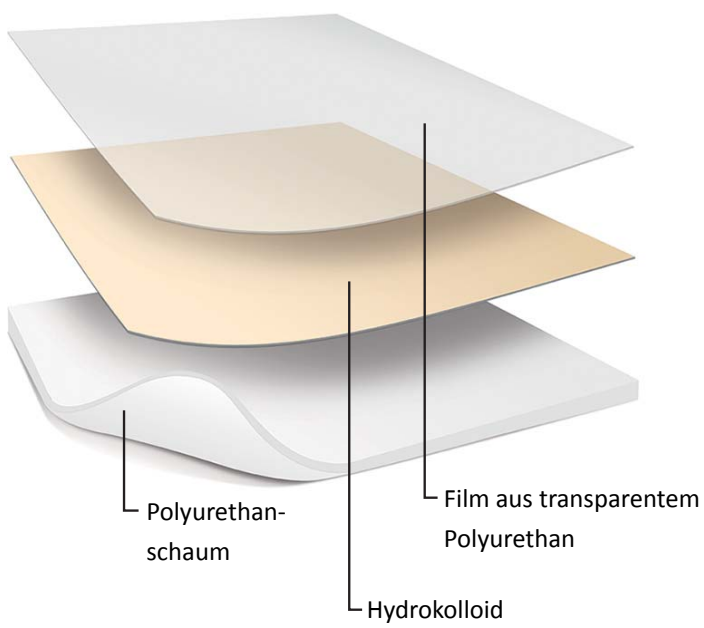

Wundauflage ohne Rand

