



EMODIAL®

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com

Importer & CH-REP:



Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | info@fornimedical.ch
www.fornimedical.ch


REF.DE020-FM REV 10/2021



EMODIAL®

EXIT-PRO® AG
SoftTouch

Katheterverband

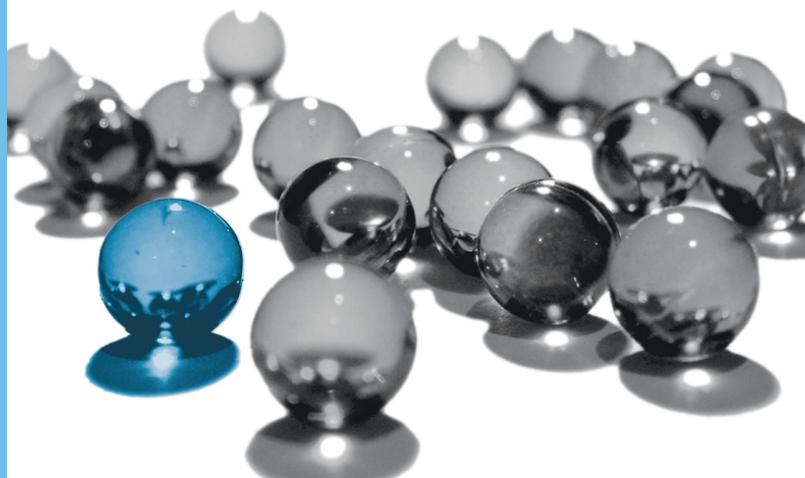

BESCHREIBUNG

EXIT-PRO[®] AG SoftTouch ist ein saugfähiger, nicht haftender Verband mit Silberionenabgabe auf einem Vliesstoffträger mit "SoftTouch"-Klebertechnologie.

VERWENDUNGSZWECK

- Zur Verwendung als Verband für die Einführungs- bzw. Austrittsstellen von vaskulären und nicht vaskulären perkutanen Geräten/Kathetern und als mechanische Barriere für die Kompression und Absorption von Exsudaten.
- Erfordert keine sekundären Verbände.
- Kompatibel mit allen handelsüblichen Kathetertypen.

VERWENDUNGSNUTZEN

Der Verband bewirkt eine vollständige Schutzwirkung:

- **Der Silberionen freisetzende Film:** bewirkt eine sofortige und lang anhaltende antibakterielle Wirkung von bis zu 7 Tagen und trägt dazu bei, das Risiko von Infektionen an der Ein- bzw. Austrittsstelle bei der Verwendung von perkutanen Geräten/Kathetern zu reduzieren.
- **Der Träger mit "SoftTouch"-Klebertechnik:** schützt die Haut vor mechanischen Schäden, die durch das ständige Entfernen von Pflastern (als Folge wiederholter Behandlungen) verursacht werden, begünstigt die Gewebereparatur und wirkt als Behandlung und Prävention von MARSU.
- verhindert das Auftreten von Rötungen und Reizungen bei längerer Anwendung der Pflaster;
- optimale Lösung für Patienten, die zu trockener oder schuppiger Haut neigen, wie sie z. B. bei Dialyse- oder Onkologie-Patienten vorkommt.




Die Zartheit des SoftTouch-Klebers verbindet sich mit der antibakteriellen und präventiven Wirkung von Silber. Ideal für chronische Patienten oder für Patienten mit empfindlicher oder sensibilisierter Haut.



Traditioneller Klebstoff oder SoftTouch?

Herkömmliche Klebstoffe

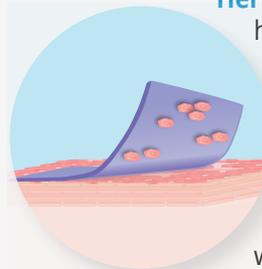


haften nicht gleichmäßig auf der Haut, sondern hinterlassen Lücken auf der Oberfläche, die anschließend aufgefüllt werden.

Es wird ein Zug auf die Haut ausgeübt, der die Fixierung verstärkt; geeignet für nicht wiederholte Behandlungen.

Bei SoftTouch-Klebstoffen

ist die Haftung auf der Haut gleichmäßig und hat eine niedrige Oberflächenspannung.

Die Entfernung ist weniger traumatisch, was diese Art von Klebstoff ideal für wiederholte Behandlungen oder für empfindliche und sensible Haut macht.

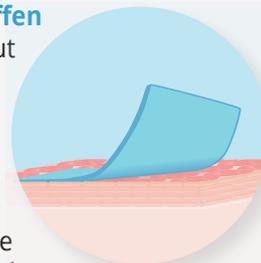

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Desinfizieren Sie die Austrittsstelle und lassen Sie sie vollständig trocknen.
2. Beide Kanten des Schutzpapiers des Pflasters anheben.
3. Platzieren Sie das **EXIT-PRO[®] AG SoftTouch** Pad in Kontakt mit der Haut an der Austrittsstelle, so dass das Ende des perkutanen Geräts/Katheters aus dem vorbereiteten Schnitt herausragt, und fixieren Sie es durch leichten Druck auf den umgebenden Klebstoff.
4. Tauschen Sie das **EXIT-PRO[®] AG SoftTouch** bei jeder Sitzung oder jedes Mal aus, wenn es nass oder schmutzig wird oder wenn es notwendig ist, die Austrittsstelle zu inspizieren.

REFERENZEN

| CODE | PFLASTER (cm) | PAD (cm) | LOCH-Ø (cm) | STÜCK/PAKET | PAKETE/BOX |
|----------|---------------|----------|-------------|-------------|------------|
| S0810/AG | 10 x 8 | 5 x 4 | 0.4 | 1 | 25 |