



EMODIAL®

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com

Importer & CH-REP:



Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | info@fornimedical.ch
www.fornimedical.ch


Ref. DE009-FM - Rev. 11/2021



EMODIAL®

NOVA SOVAN® AG
SoftTouch

Verband für
Gefässzugang 

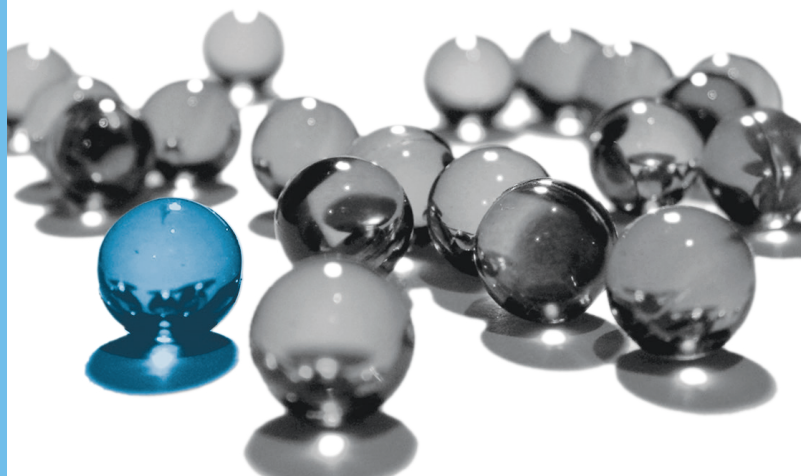

BESCHREIBUNG

NOVA SOVAN[®] AG SoftTouch ist ein saugfähiger, nicht haftender und Silberionen-freisetzender Verband auf einem Vliesstoffträger (NW) mit "SoftTouch"-Klebertechnologie.

VERWENDUNGSZWECK

- Zur komprimierenden Hämostase von Gefäßzugängen und zur Eindämmung von Exsudaten am Ende von Dialysebehandlungen, intravenösen Therapien oder Transfusionen.
- Besonders geeignet für die Versorgung von Patienten, die häufige Verbände an den Einstichstellen benötigen und bei denen Probleme mit MARS (Medical Adhesive Related Skin Injuries) auftreten.
- Optimale Lösung für trockene oder schuppige Haut, die typisch für Patienten ist, die sich beispielsweise einer Dialyse oder onkologischen Behandlung unterziehen.

VERWENDUNGSNUTZEN

Der Verband übt eine vollständige Schutzwirkung aus.

Der Silberionen-freisetzende Film:


- Garantiert eine sofortige und lang anhaltende antibakterielle Wirksamkeit von bis zu 7 Tagen und trägt so zur Verringerung des Infektionsrisikos bei Gefäßzugängen bei.
- Reduziert die Entzündungserscheinungen bei wiederholter Venenpunktion der arteriovenösen Fistel (FAV).
- Verhindert die Bildung von Schorf und macht die nachfolgenden Venenpunktionen weniger traumatisch.
- Fördert die Regeneration der Haut.

Der Träger mit "SoftTouch"-Klebertechnik:

- Schützt die Haut vor mechanischen Schäden, die durch die ständige Entfernung von Pflastern (infolge wiederholter Behandlungen) entstehen, und behandelt und verhindert MARS.
- Vermeidet das Auftreten von Rötungen und Reizungen, die durch eine längere Anwendung der Pflaster entstehen.
- Optimale Lösung für Patienten, die zu trockener oder schuppiger Haut neigen, wie sie z. B. bei Dialyse- oder Onkologiepatienten vorkommt.

Die Zartheit des SoftTouch-Klebers wird mit der antibakteriellen und präventiven Wirkung von Silber kombiniert.


Ideal für chronische Patienten oder für Patienten mit empfindlicher oder sensibilisierter Haut.

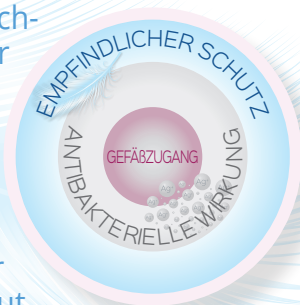

BESTELLDATEN


CODE	PFLASTER (cm)	PAD (cm)	STÜCK / PACKUNG	PACKUNGEN / BOX
S0074/AG	5 x 7.2	2.8 x 2.8	1	100

..... SoftTouch?

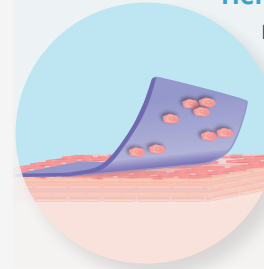


Herkömmliche Klebstoffe haften nicht gleichmässig auf der Haut, sondern hinterlassen Lücken auf der Oberfläche, die anschließend aufgefüllt werden. Es wird ein Zug auf die Haut ausgeübt, der die Fixierung verstärkt, geeignet für nicht wiederholte Behandlungen.

Bei **SoftTouch-Klebstoffen** ist die Haftung auf der Haut gleichmässig und hat eine niedrige Oberflächenspannung. Die Entfernung ist weniger traumatisch, was diese Art von Klebstoff ideal für wiederholte Behandlungen oder für empfindliche und sensible Haut macht.

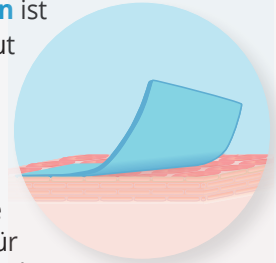

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Entfernen Sie die eine Hälfte des Schutzpapiers vom Pflaster und kleben Sie den klebenden Teil auf den Arm des Patienten.
2. Legen Sie das Pad an der Hautstelle auf den Arm, an der die Nadel entfernt wurde.
3. Entfernen Sie die andere Hälfte des Schutzpapiers und kleben Sie den verbleibenden Teil des Pflasters auf der Haut.

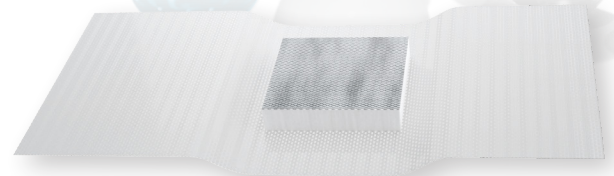

KLASSIFIKATION • CE0373 MEDIZINPRODUKT
STERILISATION • ETHYLENOXID