



**EMODIAL®**

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY  
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414  
[www.emodial.com](http://www.emodial.com) - [info@emodial.com](mailto:info@emodial.com)

Importer & CH-REP:



Heldswilerstrasse 13 | CH-9214 Kradolf  
Tel. +41 (0)71 642 35 68 | [info@fornimedical.ch](mailto:info@fornimedical.ch)  
[www.fornimedical.ch](http://www.fornimedical.ch)


Ref. FR009-FM - Rev. 11/2021



**EMODIAL®**

**NOVA SOVAN® AG**  
SoftTouch

Pansement pour  
accès vasculaire

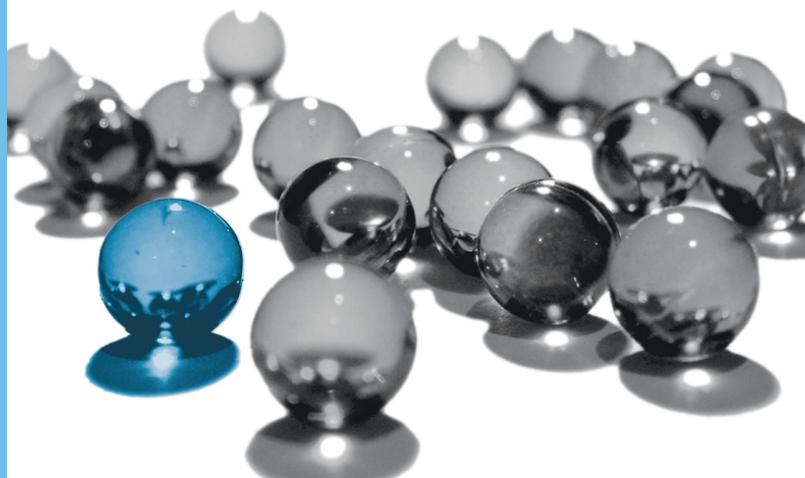

## DESCRIPTION

**NOVA SOVAN<sup>®</sup> AG SoftTouch** est un pansement absorbant non adhérent avec libération d'ions d'argent sur un support en tissu non tissé (TNT) avec la technologie adhésive "SoftTouch".

## UTILISATION PRÉVUE

- A utiliser pour l'hémostase par compression des accès vasculaires et le confinement des exsudats à la fin des traitements de dialyse, des thérapies intraveineuses ou des transfusions.
- Particulièrement adapté à la prise en charge des patients nécessitant des pansements fréquents des points d'insertion et sujets aux problèmes MARSI (Medical Adhesive Related Skin Injuries).
- Solution optimale pour les peaux sèches ou squameuses, conditions typiques des patients subissant, par exemple, des dialyses ou des traitements oncologiques.

## OBJECTIF D'UTILISATION

Le pansement effectue une action de protection complète.


### Le film de libération des ions d'argent:

- Garantit une efficacité antibactérienne immédiate et durable, jusqu'à 7 jours, contribuant à réduire le risque d'infection des accès vasculaires.
- Réduit les signes d'inflammation liés à la ponction veineuse répétée de la fistule artério-veineuse (FAV).
- Empêche la formation de l'escarre, ce qui rend les veinoponctions ultérieures moins traumatisantes.
- Favorise la régénération de la peau.

### Le support avec la technologie adhésive "SoftTouch":

- Protège la peau des dommages mécaniques causés par l'enlèvement continu des pansements (suite à des traitements répétés), traite et prévient les MARSI.
- Évite l'apparition de rougeurs et d'irritations dues à une application prolongée des pansements.
- Solution optimale pour les patients ayant tendance à avoir la peau sèche ou squameuse, ce qui est typique des patients qui suivent, par exemple, une dialyse ou des traitements oncologiques.
- Solution optimale pour les patients ayant tendance à avoir la peau sèche ou squameuse, ce qui est typique des patients qui suivent, par exemple, une dialyse ou des traitements oncologiques.


La délicatesse de l'adhésif SoftTouch est associée à l'action antibactérienne et préventive de l'argent. Idéal pour les patients chroniques ou pour les patients à la peau délicate ou sensibilisée.

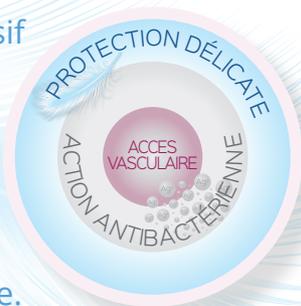

## RÉFÉRENCES


CODE	PANSEMENT (cm)	TAMPON (cm)	PCS / SACHET	SACHETS / CARTON
S0074/AG	5 x 7.2	2.8 x 2.8	1	100

## Adhésifs traditionnels ou SoftTouch?

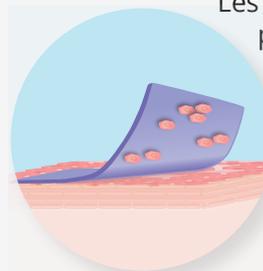

Les **adhésifs traditionnels** n'adhèrent pas uniformément à la peau, mais laissent des vides en surface qui sont ensuite comblés. Une traction est exercée sur la peau, ce qui rend la fixation plus forte, adaptée aux traitements non répétés.

Dans les **adhésifs SoftTouch**, l'adhésion à la peau est uniforme et présente une faible tension superficielle. Le retrait est moins traumatisant, ce qui rend ce type d'adhésif idéal pour les traitements répétés ou pour les peaux délicates et sensibles.

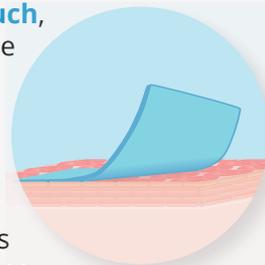

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Retirez une moitié du papier de protection du pansement et faites adhérer la partie adhésive au bras du patient.
2. Placez le tampon sur le bras à l'endroit de la peau où l'aiguille a été retirée.
3. Retirez l'autre moitié du papier de protection et faites adhérer la partie restante du pansement à la peau.

