

art. 053

# GENOUILÈRE LIGAMENTAIRE (LCA-LCP) (LCM-LCL)

CODE DE REMB. 7183191




L'attelle ligamentaire a été étudiée pour garder l'articulation du genou dans la position physiologique pendant les mouvements d'extension et de flexion, et compenser la laxité latérale.

Totalement ouvrable pour faciliter l'habillement, elle est équipée de deux fermetures (cuisse et mollet) en tissu « 3D spacer » très confortable et respirant. Les 4 ceintures de blocage, qui se ferment avec un mouvement « à pinces », assurent une fixation efficace et un réglage facile. Les deux tiges rigides et anatomiques (médiale et latérale) stabilisent le genou latéralement. Elles sont équipées de deux joint polycentriques, avec centre de rotation variable, pour reproduire le mouvement naturel de l'articulation. Soit l'extension, soit la flexion peuvent être limitée. Il est aussi possible de fixer l'angle de l'attelle pour empêcher tout mouvement.

La partie frontale et l'arrière du genou sont libres, pour permettre de changer les bandages et pour éviter toute pression sur les parties sensibles.

## INDICATIONS

- En cas de rupture et reconstruction chirurgicale des LCA et LCP ; soit avant ou après l'opération
- Traumas concernant le genou (rupture ligamentaire, distorsions, luxations, etc.). En cas de laxité latérale du genou
- Comme support pendant la phase de réhabilitation et de reprise de l'activité sportive

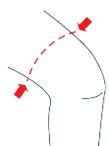

DROITE ET GAUCHE - HAUTEUR : 40 CM

TAILLE	XS	S	M	L	XL	XXL	* XXXL
(CM)*	34 - 38	38 - 43	43 - 49	49 - 56	56 - 64	64 - 73	73 - 83

\* Circonférence au dessus du genou 15 cm - \* La taille XXXL n'est disponible que sur demande

COLORIS ●



3D Spacer

**rad yarn**<sup>®</sup>  
bacteriostatic



100%  
Respirant



Anti-odeur



Durable



Bactériostatique

